

GENIUS LIGHT

Multiprogram Hi-tech Care

QUICK START GUIDE



Le 1^{er} masque multifonction combinant Light Therapy® & électrostimulation.




Beauté à la demande
8 programmes de beauté, 2 options :

Mode lumière : LED combinée avec un microcourant d'ionophorèse.

Mode lumière + Electrostimulation : LED combinée avec différents types de stimulation électrique.

A. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

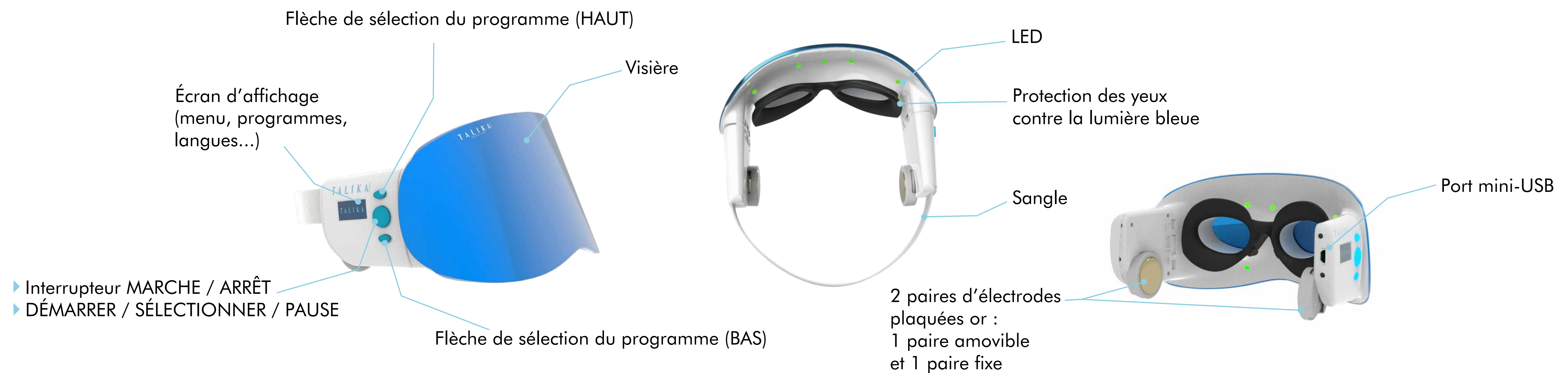




B. AVANT UTILISATION

1. Nettoyez votre visage en profondeur. N'utilisez pas **GENIUS LIGHT** si vous êtes maquillée.
2. Attachez vos cheveux.




3. Avant d'allumer **GENIUS LIGHT**, placez-le tout d'abord sur votre visage et réglez la longueur de la sangle et des électrodes plaquées or pour que le masque soit bien en place et confortable à porter.

Si les électrodes sont trop serrées, retirez la paire d'électrodes amovible et réglez la position des électrodes principales. Pour régler la position des électrodes, faites-les glisser vers l'arrière ou vers l'avant.

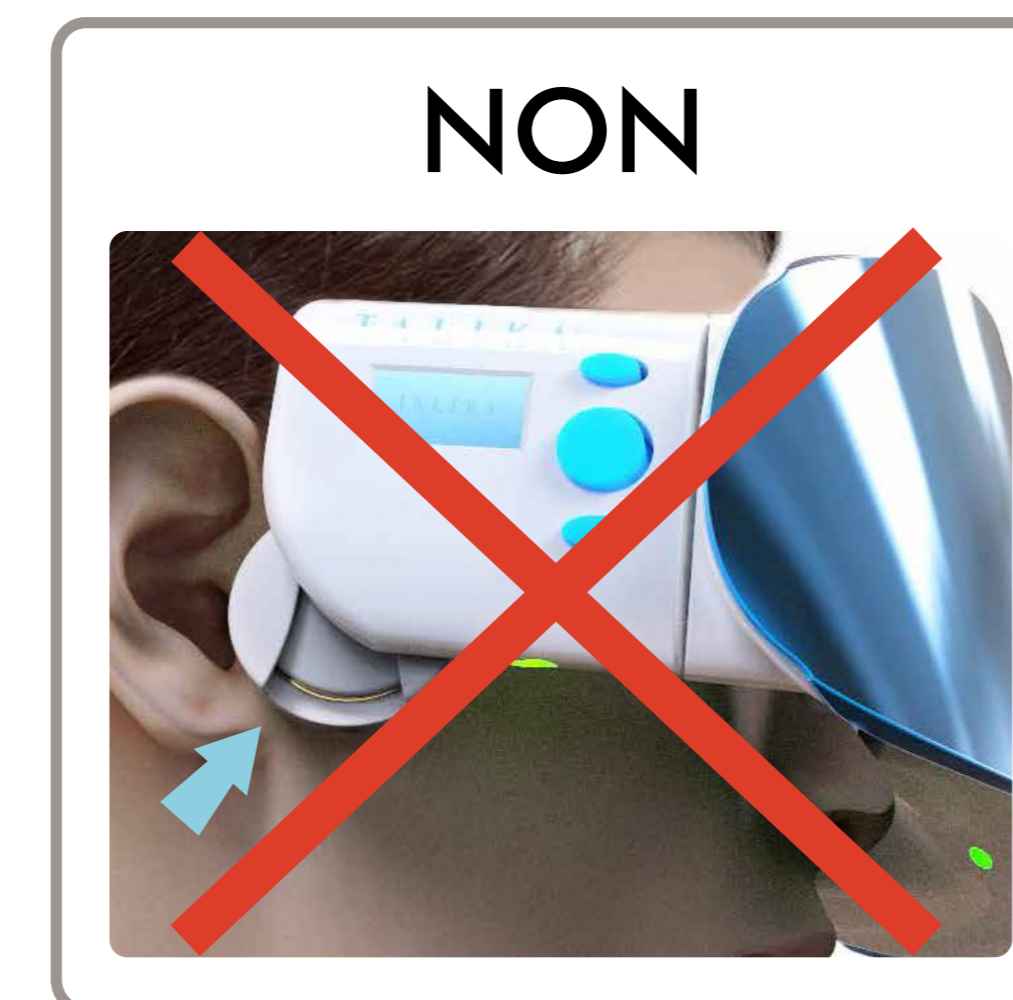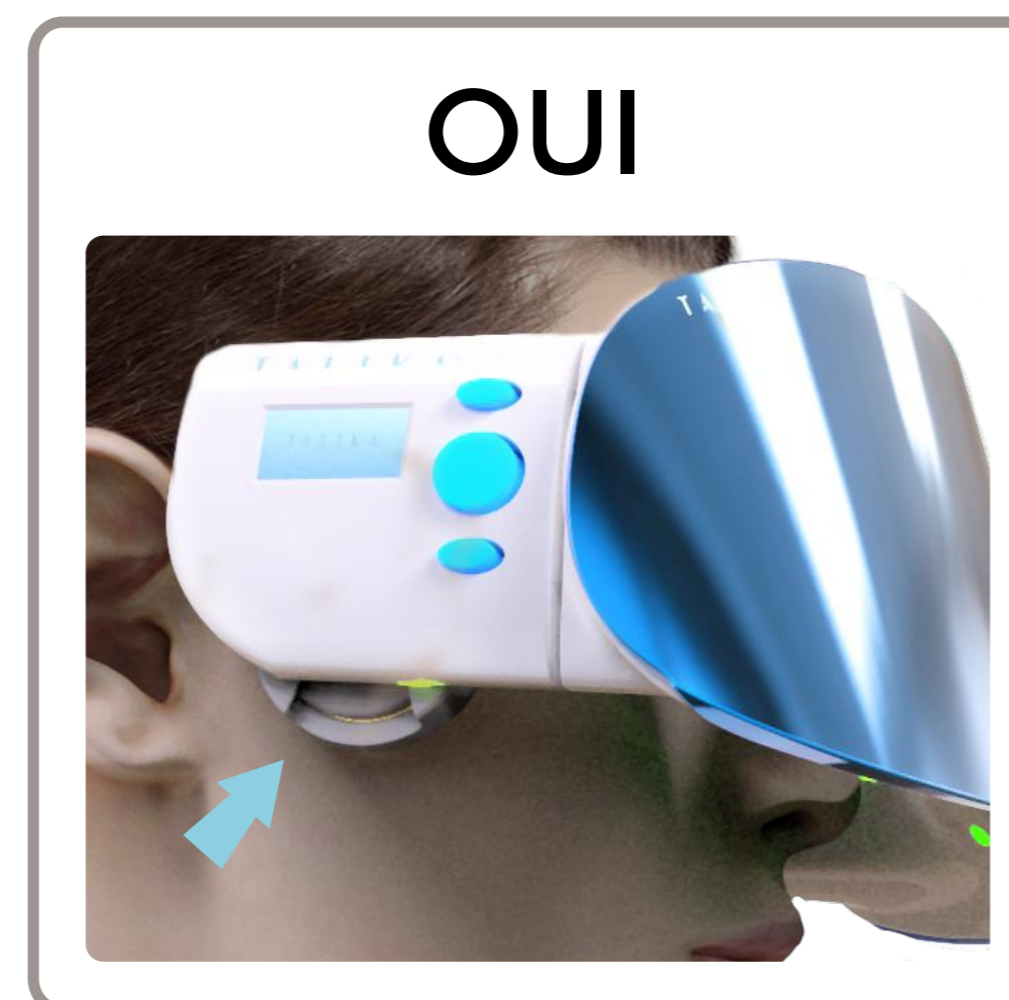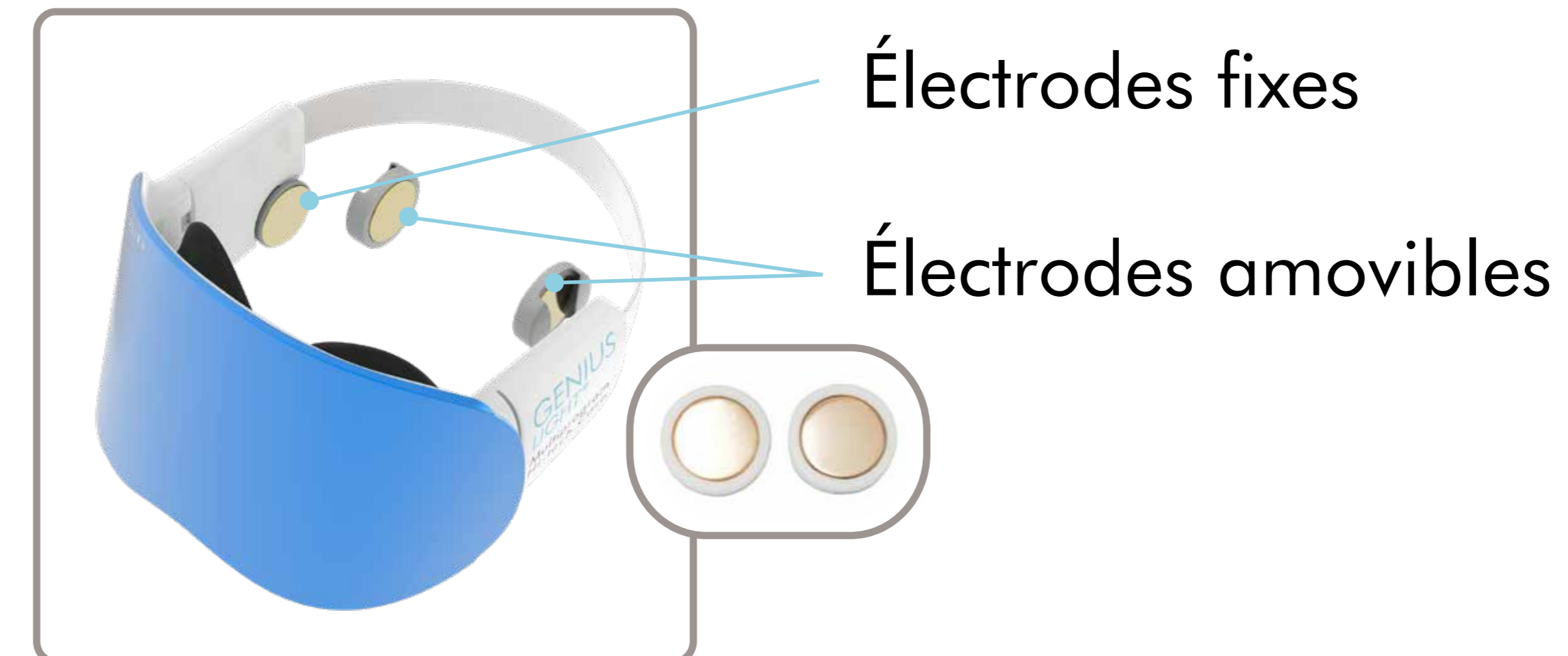

4. Humidifiez votre visage à l'aide d'une éponge de beauté ou d'un vaporisateur d'eau.

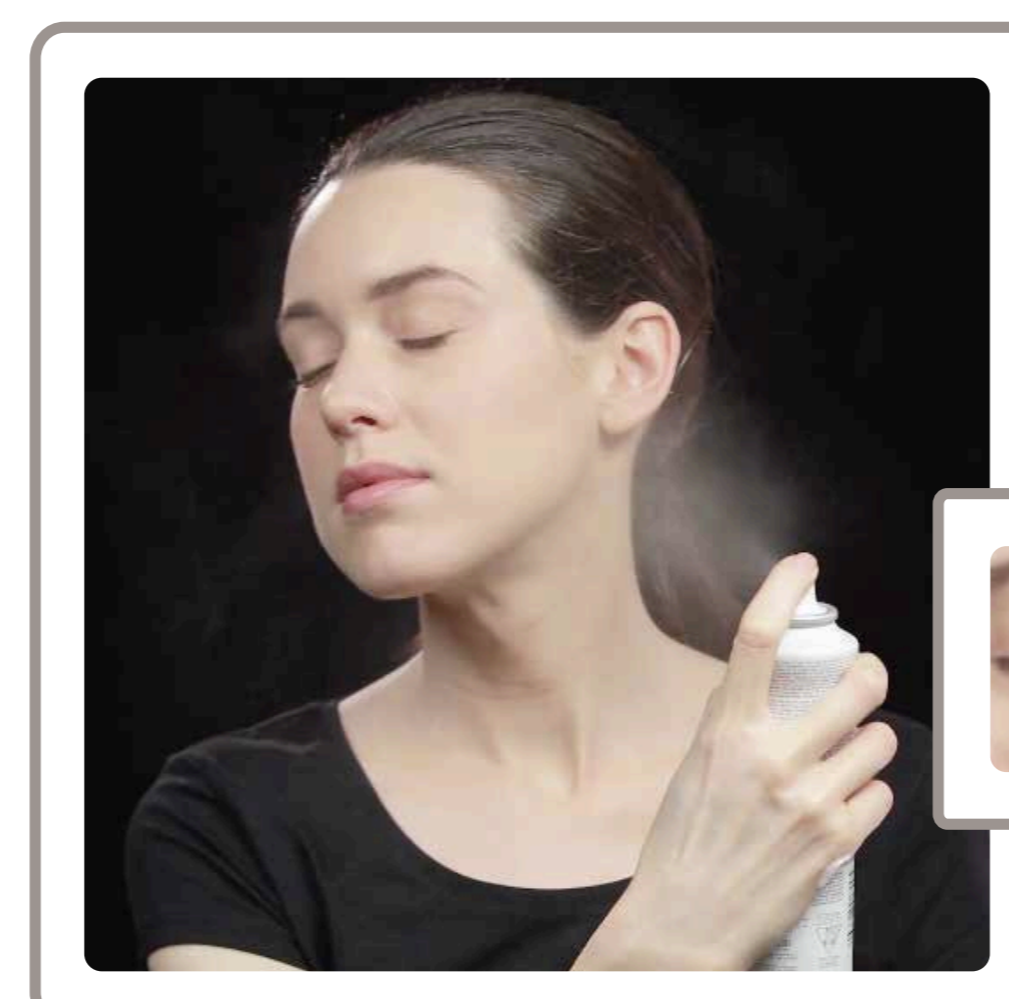


Appliquez de l'eau sur la surface de la peau en contact avec les électrodes.

5. Définissez le programme de beauté **GENIUS LIGHT** que vous souhaitez.

C. SÉLECTION DU PROGRAMME

BOUTONS DE COMMANDE DE GENIUS LIGHT

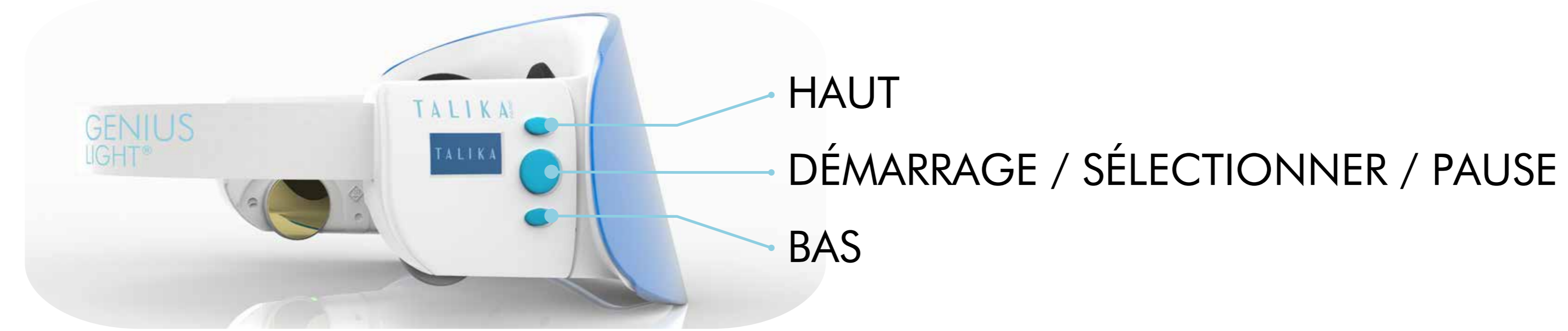

1. ALLUMEZ GENIUS LIGHT

Appuyez sur le bouton DÉMARRER pour allumer GENIUS LIGHT. L'écran s'allume en affichant le logo TALIKA GENIUS LIGHT. Appuyez de nouveau sur le bouton DÉMARRER pour accéder à l'écran « SÉLECTIONNER LA LANGUE ».



- HAUT
- DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
- BAS




2. SÉLECTIONNEZ LA LANGUE

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner l'une des langues suivantes :

- ENGLISH
- FRANCAIS
- DEUTSCH
- ITALIANO
- ESPANOL
- PORTUGES
- NEDERLANDS
- РУССКИЙ
- 中文
- 日本語



- HAUT
- DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
- BAS

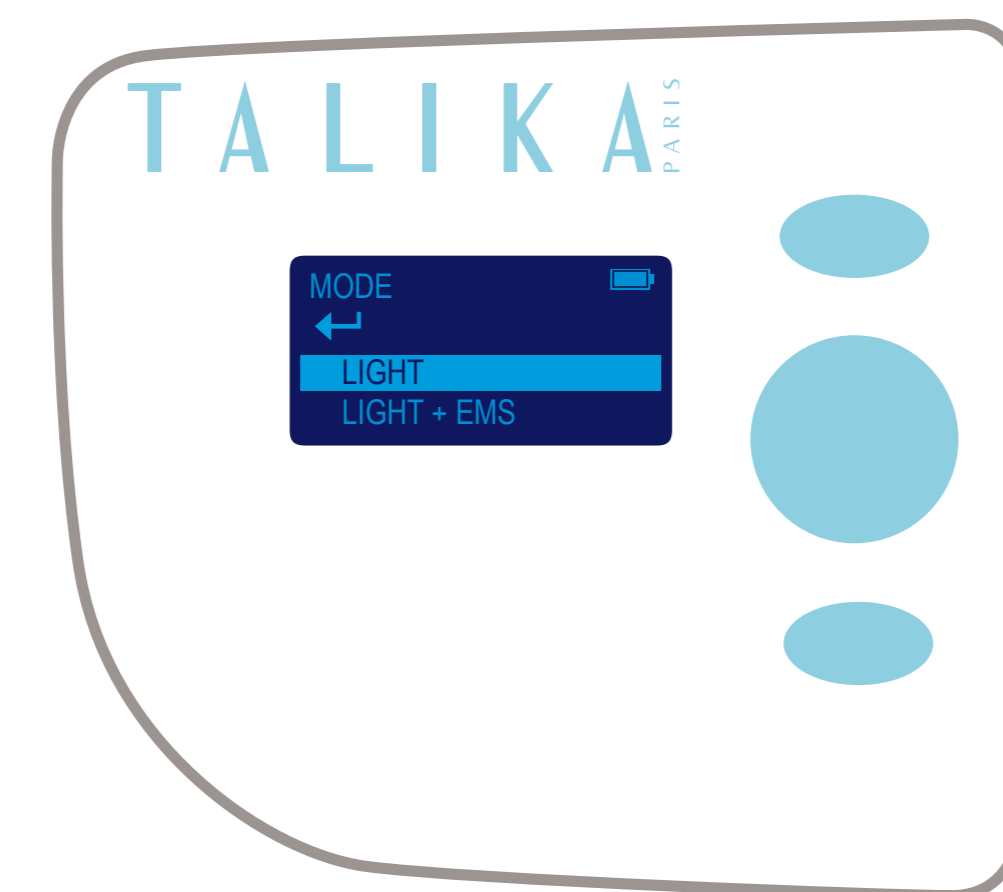

3. SÉLECTIONNEZ LE MODE

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le MODE :


- LUMIÈRE
- LUMIÈRE + Électrostimulation

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.

Pour revenir au MENU précédent, sélectionnez le signe flèche RETOUR à l'aide du bouton HAUT et appuyez sur SÉLECTIONNER.



- HAUT
- DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
- BAS
- RETOUR

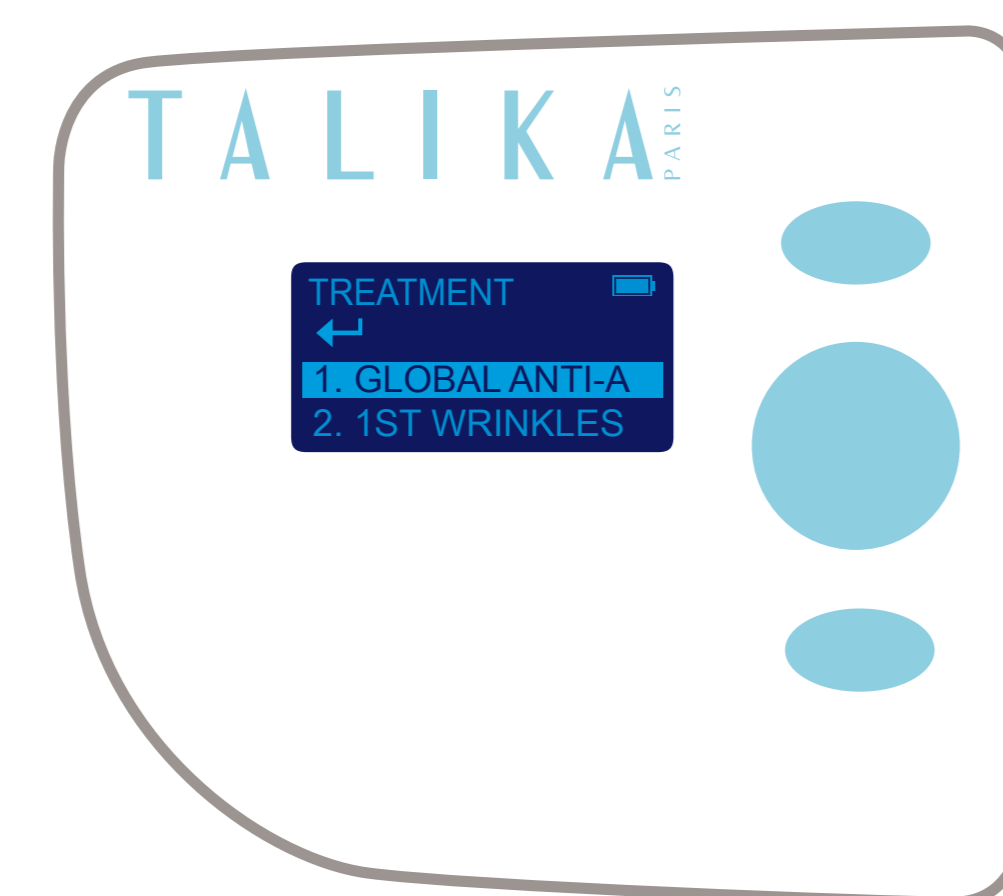

4. SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner l'un des programmes suivants :

- ANTI-ÂGE GLOBAL
- 1^{ères} RIDES
- ANTI TACHES
- ANTI IMPERFECTIONS
- DÉTOX
- ANTI-STRESS
- COUP L'ÉCLAT
- APRÈS-SOLEIL

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.

Pour revenir au MENU précédent, sélectionnez le signe flèche RETOUR à l'aide du bouton HAUT et appuyez sur SÉLECTIONNER.



- HAUT
- DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
- BAS
- RETOUR

D. PROGRAMMES

MODE LUMIÈRE

5. DÉMARREZ LE PROGRAMME

- ▶ L'icône DÉMARRER apparaîtra sur l'écran une fois que vous aurez confirmé votre sélection. Vous pourrez alors commencer le programme.
- ▶ Assurez-vous que votre visage est encore humide. Si votre visage s'est asséché pendant la configuration de l'appareil, humidifiez-le de nouveau.
- ▶ Allumez **GENIUS LIGHT** avant d'appuyer sur DÉMARRER pour commencer le programme de beauté, afin d'éviter que les lumières ne vous éblouissent.



L'ionophorèse utilise un courant imperceptible et d'intensité fixe. Inutile de régler le niveau d'intensité. Ce courant ne provoque aucune sensation, excepté un léger chatouillement ressenti par certains types de peau.

ANTI-AGING
03m 45s

La durée du programme est prédéfinie. L'horloge de compte à rebours affichée sur l'écran indique la durée restante du programme.

Le programme s'arrêtera automatiquement lorsque le temps prédéfini sera écoulé.

BYE


Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 minutes, il S'ÉTEINDRA automatiquement.

Pour forcer l'appareil à s'éteindre, appuyez sur le bouton DÉMARRER pendant 2 secondes. L'écran affichera « AU REVOIR » et l'appareil sera éteint.

MODE LUMIÈRE + ÉLECTROSTIMULATION

5. DÉMARREZ LE PROGRAMME

- ▶ Le message « Prêt à démarrer » apparaîtra sur l'écran une fois que vous aurez confirmé votre sélection. Vous pourrez alors commencer le programme de beauté.
- ▶ Assurez-vous que votre visage est encore humide. Si votre visage s'est asséché pendant la configuration de l'appareil humidifiez-le de nouveau.
- ▶ Allumez **GENIUS LIGHT**. Le programme démarre automatiquement lorsque les électrodes plaquées or sont en contact avec votre peau.

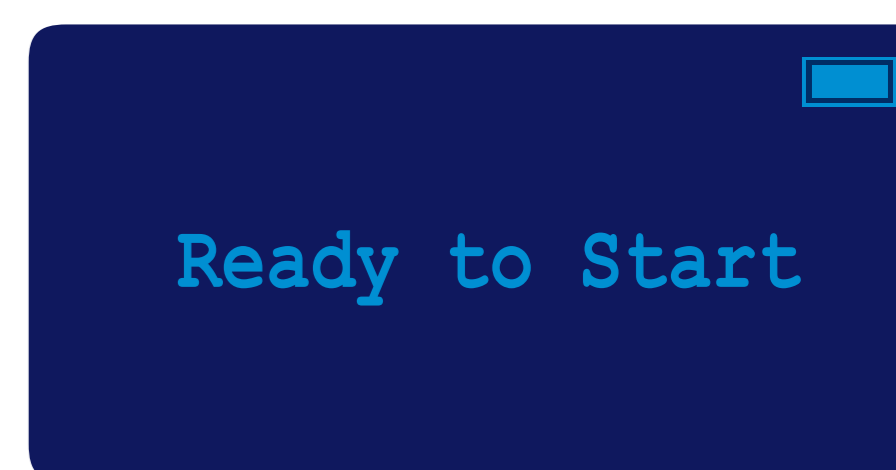

Le programme par électrostimulation utilise une stimulation électrique qui stimule les muscles de votre visage. Vous pouvez régler l'intensité de 1 à 20, afin que le mouvement des muscles ne provoque pas de gêne.

ANTI-AGING
03m 45s Int:08

20 niveaux d'intensité sont affichés sur l'écran à côté de l'horloge de compte à rebours pour le programme. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour régler l'intensité.



EN CAS DE SENSATION ÉLECTRIQUE GÊNANTE : vous pouvez soit diminuer l'intensité en faisant défiler vers le bas, soit appuyer sur DÉMARRER / SÉLECTIONNER / PAUSE pour arrêter l'appareil.

La durée du programme est prédéfinie.

Le programme s'arrêtera automatiquement lorsque le temps prédéfini sera écoulé.

PAUSE
ANTI-AGING
03m 45s Int:08

Si vous retirez le masque avant la fin du programme, il passera automatiquement en mode « PAUSE ».

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant 3 minutes, il S'ÉTEINDRA automatiquement.


BYE

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 minutes, il S'ÉTEINDRA automatiquement.

Pour forcer l'appareil à s'éteindre, appuyez sur le bouton DÉMARRER pendant 2 secondes. L'écran affichera « AU REVOIR » et l'appareil sera éteint.

E. CHARGEMENT



Prenez le câble et raccordez la partie mini-USB située sur le masque à un chargeur USB avec adaptateur ou directement à un port d'ordinateur.

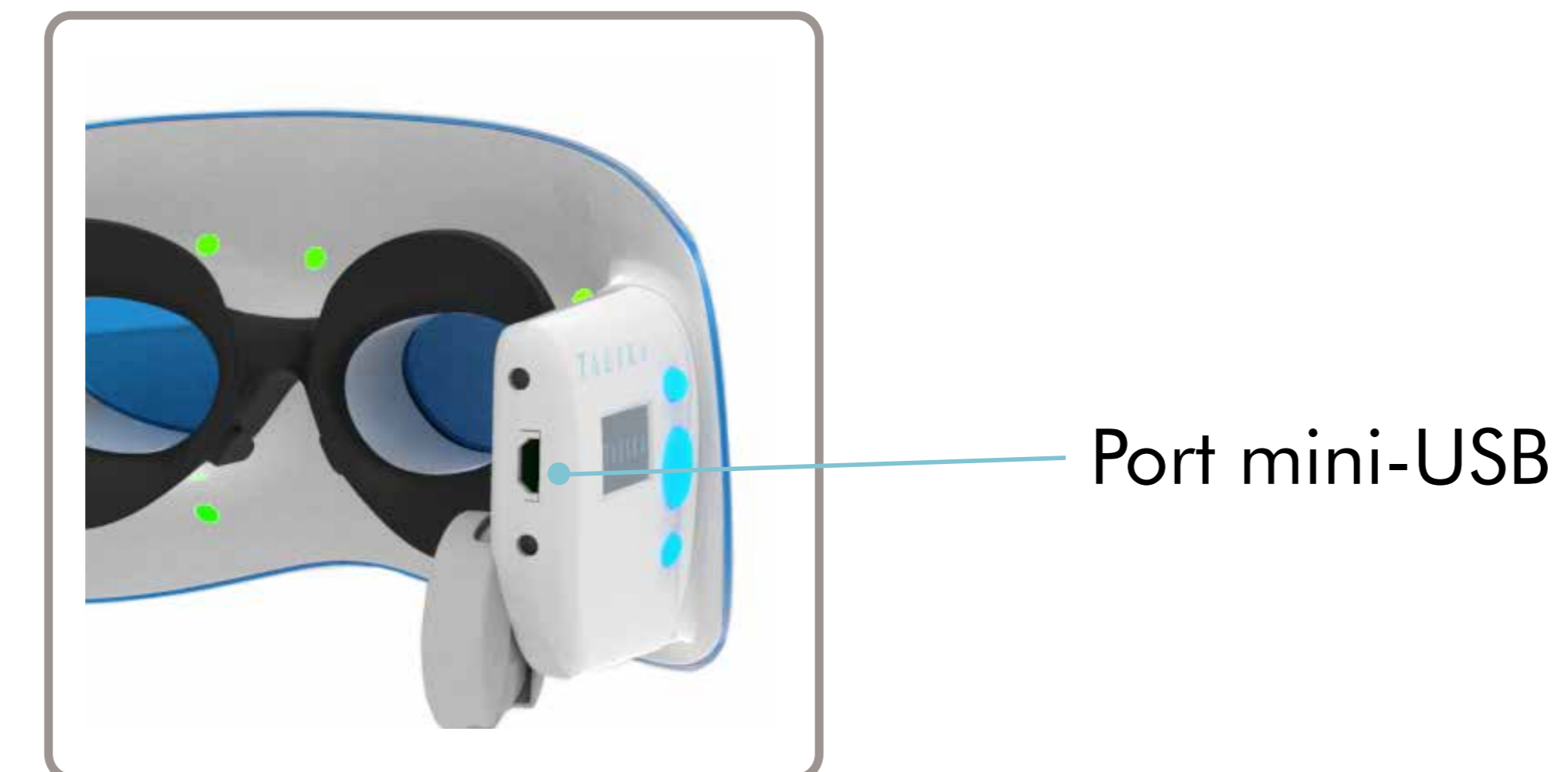


L'état d'alimentation de la batterie est indiqué sur l'écran d'affichage.



BATTERIE PLEINE

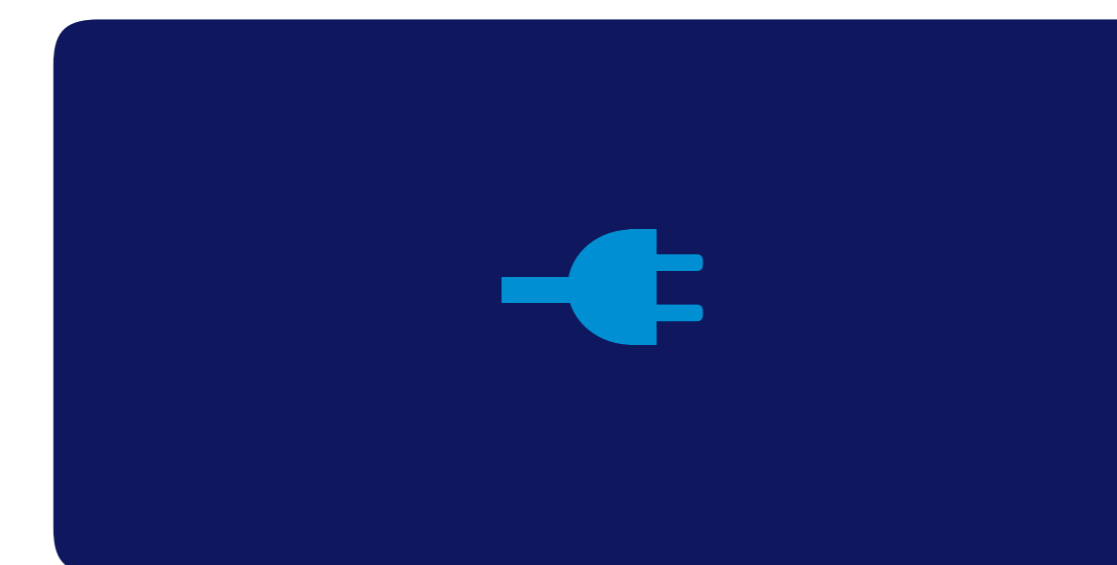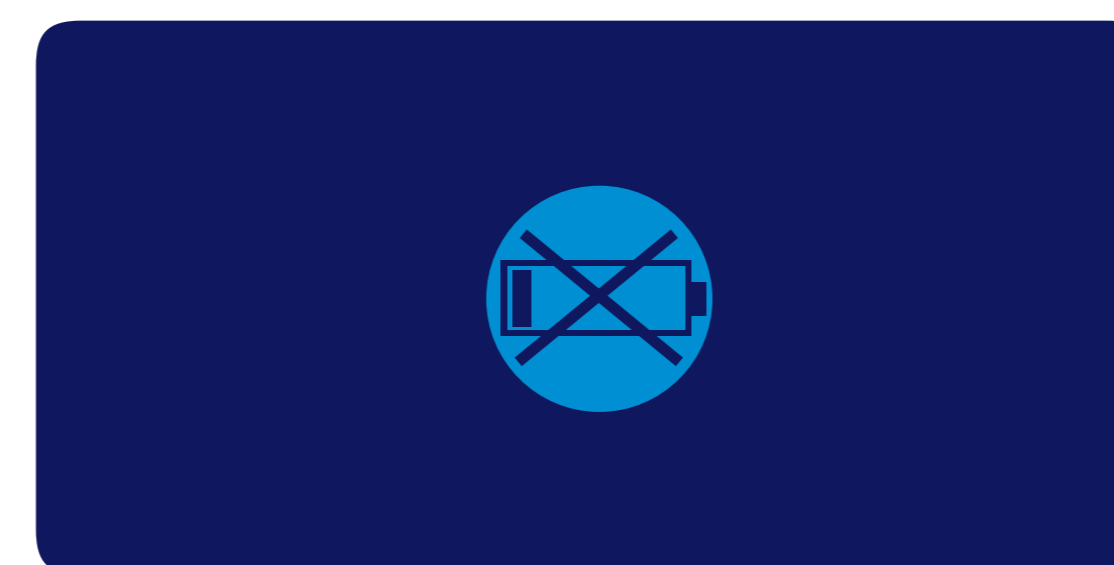

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE (LES ICÔNES SE SUCCÉDERONT)

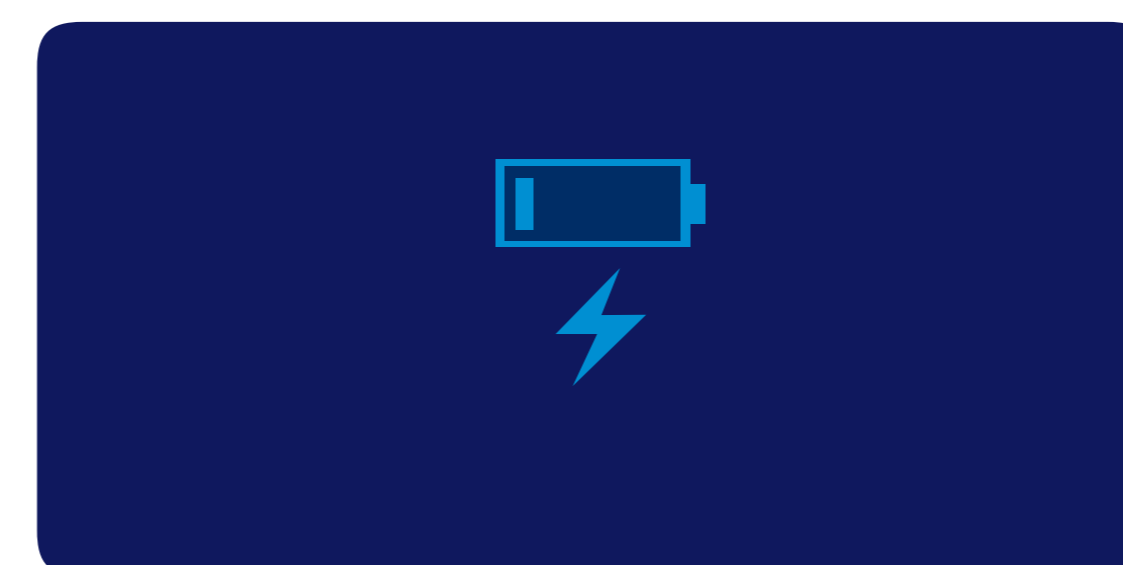

EN COURS DE CHARGEMENT

Attention : le masque GENIUS LIGHT ne fonctionne pas pendant le chargement.